

S Y N C A

사용자매뉴얼

CirC

컴팩트 안마 의자

MR320



사용 전 사용자매뉴얼을 주의 깊게 읽어 주십시오.

제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 사용 전 이 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽어 주시고, 적절한 작동 및 사용을 위해 안전 예방수칙에 특별히 유의하여 주십시오.

사용자 매뉴얼은 항상 보관하십시오.

목차

안전 예방수칙	1
각 부품의 명칭 및 기능	4
외부 구조	4
내부 구조	4
컨트롤러	5
컨트롤러 사용법	6
설치	9
설치 위치	9
바닥 보호	9
주변 환경	9
설치 방법	9
이동 방법	10
전원 켜기	10
기기 보관 및 유지	11
문제해결	12
제품 사양	13

제품 사양

제품명: Cir-C 컴팩트 안마 의자

모델번호: MR320

정격전압: 220-240V~

정격주파수: 50-60Hz

전력 요건: 50W

※지정된 전압에서만 사용하십시오.

문제해결





번호	문제	예상되는 발생 원인	해결법
1	기계가 돌아가는 소리나 약간의 튀는 소리가 납니다.	모터가 돌아가는 소리가거나 마사지 볼이 천으로 된 커버를 문지르면서 발생하는 소리로, 정상적인 현상입니다.	정상적인 현상으로 수리가 필요하지 않습니다.
2	의자에 전원이 들어오지 않습니다.	의자의 플러그가 연결되지 않았습니다.	의자의 플러그를 연결하십시오.
		전원 공급 스위치가 꺼져 있습니다.	스위치를 켜주십시오.
		안마 의자의 퓨즈가 끊어졌습니다.	새로운 퓨즈로 교체하십시오.

위의 방법으로도 문제들이 해결되지 않을 경우, 지역 판매자에게 연락하여 수리 혹은 유지보수를 요청 하십시오.

노트: 기기를 스스로 분해하지 마십시오. 당사는 이로 인해 발생하는 기기손상 혹은 부적절한 사용/수리/유지보수로 야기된 부상에 대해 책임의 의무가 없습니다. 협조에 감사드립니다.

퓨즈 교체하기

- ▶ 전원이 꺼져 있고 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.
- ▶ 일자 드라이버를 이용하여 그림1에 나와 있는 대로 퓨즈를 당기십시오.
- ▶ 오래된 퓨즈를 제거하고 같은 전력의 새 퓨즈로 교체하십시오. (그림2 참조)

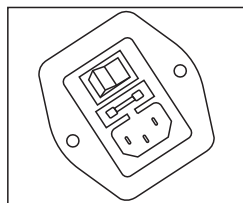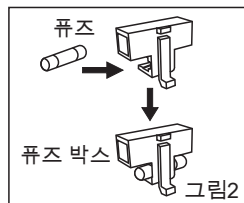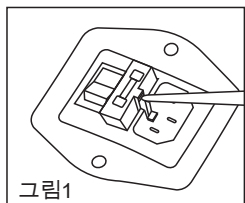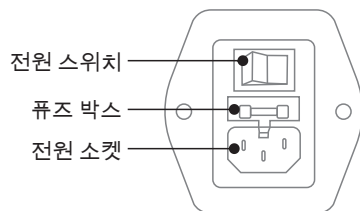

안전 예방수칙

중요 안전수칙

기기를 사용하기 전, 모든 주의사항을 읽어주십시오.

위험-감전 위험을 줄이는 법

- 1) 사용 후 및 청소 전에는 반드시 플러그를 분리하십시오.
경고-화상, 화재, 감전, 부상을 줄이는 법:
- 1) 플러그를 꽂은 상태로 장비를 방치하지 않도록 주의하십시오. 사용하지 않을 때나, 부품 조립 및 분리 시에는 반드시 플러그를 분리하십시오.
- 2) 전기장판과 같은 전열기구 위에서 사용하지 마십시오. 담요 혹은 베개 아래에서 기기를 작동하지 마십시오. 과도한 열이 발생할 수 있으며 이는 화재, 감전 등의 피해를 야기할 수 있습니다.
- 3) 어린이, 노약자 혹은 장애가 있는 사람이 사용할 시, 혹은 기기의 근처에 있을 시 주의 깊은 관찰이 필요합니다.
- 4) 사용설명서에 제시된 목적으로만 장비를 사용하십시오. 제조사가 제공하지 않은 기타 부속품 사용을 금합니다.
- 5) 전원코드나 플러그에 이상이 있는 경우 사용을 중지하십시오. 장비가 제대로 작동하지 않거나, 멀어뜨렸거나, 손상이 있거나 장비가 침수되었을 경우 검사 및 수리를 위해 공인된 서비스센터로 반환해 주십시오.
- 6) 전원코드를 이용해서 장비를 이동하거나, 손잡이로 사용하지 마십시오.
- 7) 전원코드를 가열된 표면에 가까이 두지 마십시오.
- 8) 통풍구가 막힌 상태에서 작동하지 마십시오. 천, 머리카락 등이 통풍구를 막지 않도록 하십시오.
- 9) 어떤 구멍에도 물체를 떨어트리거나 삽입하지 마십시오.
- 10) 야외에서 사용하지 마십시오.
- 11) 에어로졸 스프레이가 사용되는 곳, 산소가 투여되는 곳에서의 사용을 금합니다.
- 12) 콘센트에서 플러그를 분리하기 전에 모든 스위치의 전원을 꺼 주십시오.

위의 안전 수칙을 꼭 기억하십시오.

안전 예방수칙

안전 예방수칙

- ▶ 적절한 작동을 위해 사용 전 이 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽으십시오.
- ▶ 아래의 "안전 예방수칙"은 이 안마의자를 올바르게 사용하는 데에 도움이 됩니다.

	주의	부적절한 작동은 기기를 손상시킬 수 있습니다.
	경고	부적절한 작동은 부상을 야기할 수 있습니다.

	금지. 특정 안내는 왼쪽과 같은 그림으로 표기됩니다. (예. 왼쪽 그림은 장비 분해를 금지 한다는 의미입니다.)
	필수 안내는 왼쪽과 같은 그림으로 표기됩니다. (예. 왼쪽 그림은 전원 플러그를 분리하라 는 의미입니다.)

주의

	필수 아래 사항에 해당되는 사람의 경우, 사용 전 주치의와의 상담이 필요합니다. 1. 심박조율기 등의 전기 의료기기를 사용하는 사람 2. 현재 치료를 받고 있는 사람, 특히 건강상태가 불편하거나 양호하지 않은 사람 3. 악성 종양, 심장병 혹은 기타 심각한 의학적 질병을 겪고있는 사람
	금지 ♦ 정신 장애가 있는 사람은 감독 없이 이 기기의 사용을 금합니다. ♦ 어린이들의 안마의자 사용 혹은 안마의자 위에서 노는 행위를 금합니다. ♦ 1명 이상의 사람이 동시에 안마의자를 사용하는 것을 금합니다. ♦ 전원 플러그에 손상이 있는 경우, 즉시 이를 분리하시고 수리 혹은 교체를 위해 공인 서비스 센터에 연락하십시오.
	분해금지 당사가 지정한 유지 보수 관리자를 제외한 사람의 기기 분해, 유지 및 재조립을 금합니다. 기기에 문제가 있을 경우, 지역 판매자에게 즉시 연락하십시오.

기기 보관 및 유지

1. 청소

- ▶ 청소 전, 플러그를 반드시 분리해 주시기 바랍니다. 세제로 약간 적신 천으로 안마의자 본체를 닦아주시고, 부드러운 마른 천으로 닦아내십시오.



경고

- ▶ 벤젠, 신나와 같은 부식을 일으킬 수 있는 세제 사용을 금합니다. 커버가 변색되거나 균열이 가고 부식될 수 있습니다. 커버를 다림질 하지 마십시오.

2. 유지

- ▶ 작업 전 플러그를 반드시 분리하십시오.
- ▶ 먼지를 털어내거나 청소기로 흡입하십시오. 안마의자를 항상 깨끗하게 유지하시고, 습윤한 공간에 보관하지 마십시오.



경고

- ▶ 직사광선 혹은 고온의 장소에 기기를 보관하지 마십시오. 커버 변색을 야기할 수 있습니다.

3. 인조 가죽 및 안감

- ▶ 부드러운 마른 천을 이용해 장비를 청소하십시오.
- ▶ 매 2~3개월마다 세제로 적신 깨끗한 천으로 닦아 주시고, 마르고 난 후 깨끗한 부드러운 마른 천으로 다시 닦아주십시오.

설치

이동방법

- ▶ 스위치를 끄고 의자의 플러그를 제거하십시오.



경고

- ▶ 사람이 사용중인 상태로 의자를 이동하지 마십시오.
- ▶ 의자 이동 시 팔걸이를 잡지 마시고 바닥부 및 등받이만 잡고 옮기십시오.

- ▶ 콘센트에 전원 코드를 연결하십시오.

- ▶ 의자에 앉은 상태에서 팔걸이 우측 하단의 전원 버튼을 눌러 켜십시오.



경고


- ▶ 전원을 켜기 전 전원 선이 손상되지 않았는지 반드시 확인하십시오.
- ▶ 플러그를 꽂기 전 스위치가 꺼져 있는지 반드시 확인하십시오.

접지 안내

이 기기는 반드시 접지되어야 합니다. 오작동 혹은 고장이 날 경우, 접지는 전류의 최소저항 경로를 제공하여 감전의 위험을 줄입니다. 이 제품은 장비 접지 도체와 접지 플러그가 있는 코드를 갖추고 있습니다. 플러그는 반드시 지역 코드 및 규정에 따라 올바르게 설치되고 접지된 콘센트에만 연결되어야 합니다.

위험 장비 접지 도체의 부적절한 연결은 감전을 야기할 수 있습니다. 기기가 올바르게 접지되었는지 확인하고 싶을 경우 전문 전기기사 혹은 서비스기사와 함께 확인하십시오. 기기와 함께 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않는다면, 임의로 플러그를 변경하지 말고 전문 전기기사에게 요청하여 적합한 콘센트를 설치하십시오.

이 기기는 120볼트 회로용이며, 우측 그림A와 같은 접지 플러그가 있습니다. 반드시 기기가 플러그와 같은 형태의 콘센트에 연결되었는지 확인 하십시오. 어댑터 사용은 허용되지 않습니다.

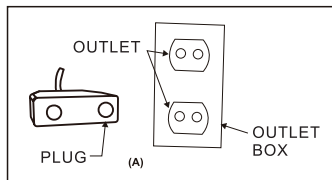

접지

- ▶ 본 마사지 의자는 1단계 전기 기기에 포함되어 있습니다. 3코어 전원 공급 소켓을 사용하시고, 사용 중 누전, 감전 및 기타 사고가 일어나지 않도록 접지 와이어가 전원 공급 소켓에 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

안전 예방수칙



경고



필수

- ◆ 안마의자를 연속적으로 20분 이상 사용하거나, 신체 한 부위만 5분 이상 지속적으로 마사지 하지 마십시오.
- ◆ 평평한 곳에서 사용하십시오.
- ◆ 파워 플러그를 제거할 때에는 플러그의 머리부분을 잡으십시오. 코드 부분을 잡고 당기지 마십시오.
- ◆ 화재 혹은 안마의자의 손상을 방지하기 위해 명시된 전압이 아닌 전원에는 플러그를 연결하지 마십시오.
- ◆ 사용 전, 등 쿠션 아래의 등받이 혹은 천 부분이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 만약 손상 된 경우 바로 사용을 중지하시고 지역 판매자에게 수리를 요청하십시오.
- ◆ 젖은 손으로 컨트롤러를 작동하지 마십시오. 무거운 물체를 컨트롤러 위에 올려놓지 마십시오.
- ◆ 200lb(90kg)이하의 사용자만 사용하십시오.
- ◆ 이 안마의자와 기타 치료기기를 함께 사용하지 마십시오.



금지

- ◆ 사용 시 불편함을 야기할 수 있으므로, 식사 직후 안마의자 사용을 금합니다.
- ◆ 안마의자 작동 중 안마의자에서 수면을 취하지 마십시오.
- ◆ 음주 후 혹은 컨디션이 좋지 않을 시 안마의자를 사용하지 마십시오.
- ◆ 덮개가 더러워진 경우, 가죽 클리너를 이용하여 닦아주십시오. 절대로 화학적 세제, 휘발유, 혹은 세제 등을 사용하지 마십시오.




플러그 분리


- ◆ 유지보수 전 반드시 플러그를 분리하십시오. 또한 감전을 방지하기 위해 젖은 손으로 플러그를 연결하거나 분리하지 마십시오.
- ◆ 기기를 사용하지 않을 시 전원 스위치를 끈 후 플러그를 분리하십시오.

각 부품의 명칭 및 기

외부구조

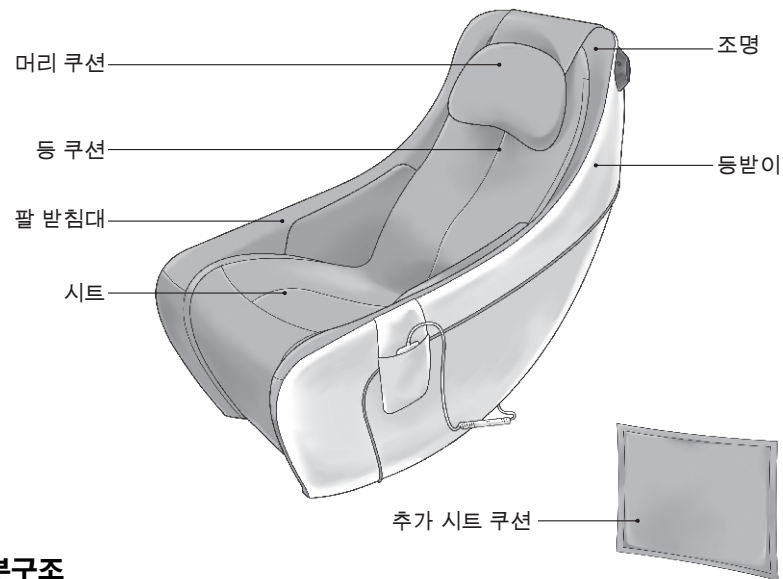

내부구조

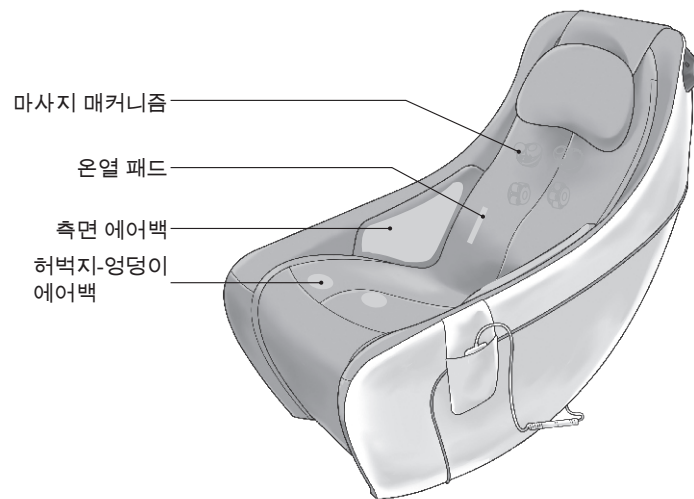


설치

설치방법

(기기를 옮길 시 최소 2인이 함께 옮기는 것을 추천합니다.)


1단계:

- ▶포장을 제거하고 안마의자 및 모든 부속품을 조심스럽게 꺼내십시오.
- ▶지지대를 뒤로 돌리십시오.(지지대는 안마의자의 바닥부에 있습니다.)

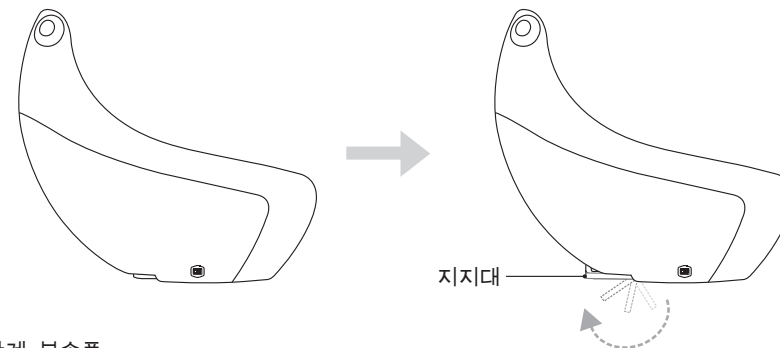

2단계: 부속품

- ▶의자에 전원 코드를 꽂은 후 전원 스위치를 켜십시오. 이후 리모컨으로 안마의자를 시작하십시오.

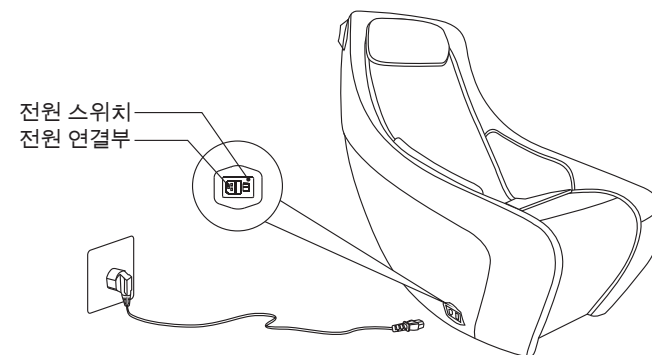

⚠ 경고

- ▶ 사용 전 케이블이 엉키지 않았는지 반드시 확인하십시오.

설치

설치위치

안마의자의 앞 뒤로 안전 거리를 반드시 확보 하십시오.


뒤: 벽 혹은 기타 장애물로부터 최소 4인치(10cm)

앞: 기타 장애물로부터 최소 8인치(20cm)

신호 장애를 방지하기 위해 TV, 라디오,


비디오, 오디오 장치로부터 최소

40인치(1m)의 간격을 두고 설치하십시오.

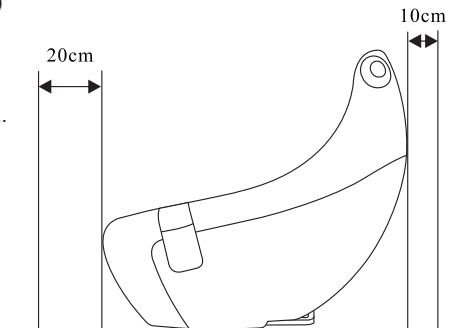

바닥보호

▶ 바닥의 수평을 맞추기 위해 안마의자 아래에 카펫 혹은 기타 패드를 깔아주십시오.

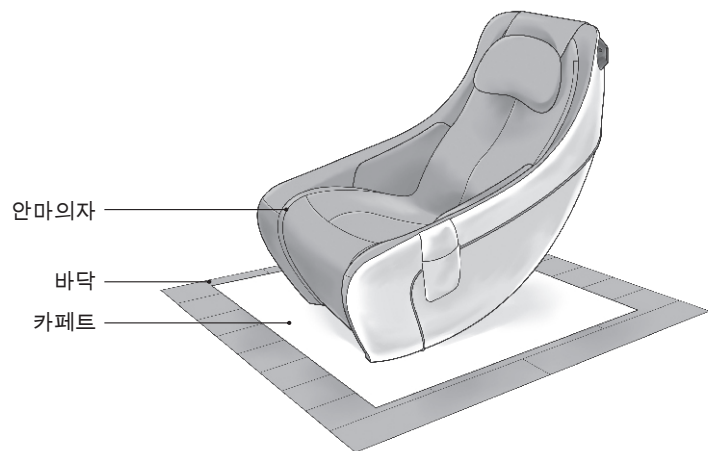

주변환경




전기적 위험을 피하기 위하여 안마의자를 습윤한 곳에 두지 마십시오. (예. 욕실)



화재 혹은 인조가죽 재질의 손상을 피하기 위하여 안마의자를 고온의 물체 근처에 두지 마십시오. (예. 스토브)

각 부품의 명칭 및 기능

컨트롤러

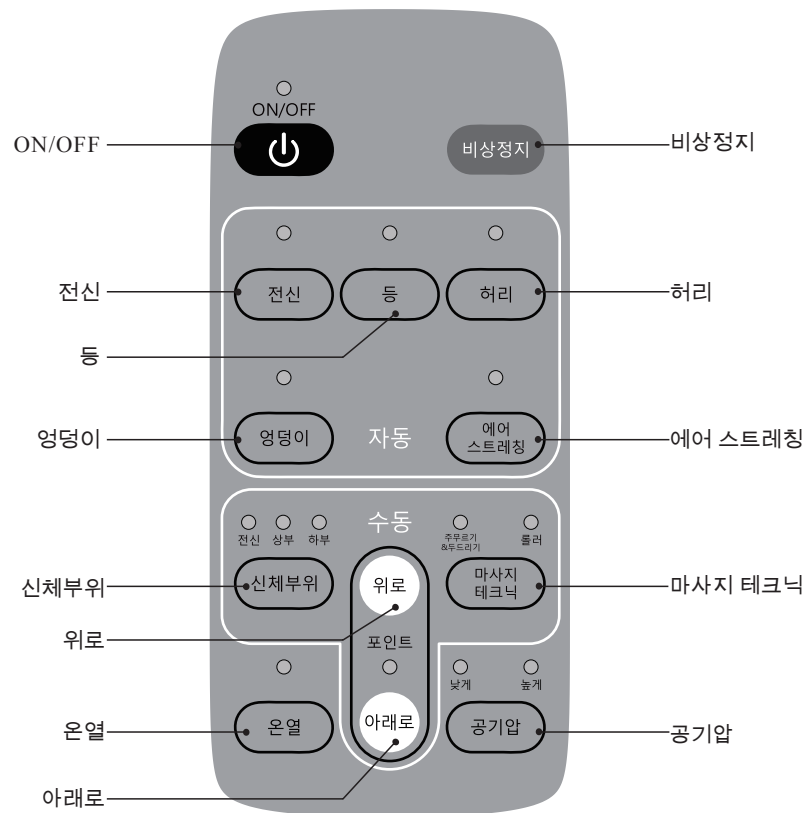

각 부품의 명칭 및 기능

컨트롤러 사용법



ON/OFF

- ▶ 전원이 연결되어 있을 때, "ON/OFF"버튼을 눌러 의자 전원을 켜십시오. 조명이 켜지면 전원이 켜졌다는 뜻이며 자동 혹은 수동 프로그램 중 원하는 마사지를 골라 시작하십시오. (적정 사용시간은 15분입니다.) (ON/OFF 버튼을 누르고 30초 이내에 프로그램을 선택하지 않는다면 자동적으로 전원이 꺼집니다.)

비상정지

비상정지

- ▶ "비상정지" 버튼을 누르면 모든 동작이 즉시 멈추며, ON/OFF 버튼을 눌러 마사지를 재 시작할 수 있습니다.

전신

전신

- ▶ 전원이 켜진 상태에서 "전신" 버튼을 눌러 전신을 위한 자동 코스를 시작하십시오.

등

등

- ▶ 전원이 켜진 상태에서 "등" 버튼을 눌러 등을 위한 자동 코스를 시작하십시오.

허리

허리

- ▶ 전원이 켜진 상태에서 "허리" 버튼을 눌러 허리를 위한 자동 코스를 시작하십시오.

엉덩이

엉덩이

- ▶ 전원이 켜진 상태에서 "엉덩이" 버튼을 눌러 엉덩이와 허벅지를 위한 자동 코스를 시작하십시오.

에어 스트레칭

에어 스트레칭

- ▶ 전원이 켜진 상태에서 "에어 스트레칭" 버튼을 눌러 공기압 자동 코스를 시작하십시오

신체부위

신체부위

- ▶ 자동 마사지 모드 진행 중 "신체부위" 버튼을 눌러 수동 마사지 모드로 변경할 수 있으며 마사지 위치를 전신, 상부, 하부로 변경할 수 있습니다.
- ▶ 수동 마사지 모드 진행 중 "신체부위" 버튼을 눌러 마사지 위치를 전신, 상부, 하부로 변경할 수 있습니다.

각 부품의 명칭 및 기능

마사지 테크닉

마사지 테크닉

- ▶ 자동 마사지 모드 진행 중, "마사지 테크닉" 버튼을 눌러 수동 모드로 변환 하십시오. 이후 주무르기&두드리기 모드 혹은 롤러 모드로 변경할 수 있습니다.

위로

위로

- ▶ 모든 마사지 모드에서, "위로" 버튼을 눌러 "포인트"마사지 모드로 변경할 수 있습니다. 버튼을 계속 누르고 있으면 마사지 매커니즘이 위로 올라갑니다. 포인트 모드에서는 주무르기&두드리기만 실행됩니다.

아래로

아래로

- ▶ 모든 마사지 모드에서, "아래로" 버튼을 눌러 "포인트"마사지 모드로 변경할 수 있습니다. 버튼을 계속 누르고 있으면 마사지 매커니즘이 아래로 내려갑니다. 포인트 모드에서는 주무르기&두드리기만 실행됩니다.

온열

온열

- ▶ 모든 마사지 모드에서, "온열" 버튼을 눌러 온열 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

공기압

공기압

- ▶ "에어스트레칭" 모드를 제외한 모든 마사지 모드에서 "공기압" 버튼을 눌러 공기압을 낮거나 높게 조절하거나, 공기압 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
- ▶ "에어스트레칭" 모드에서 "공기압"버튼을 눌러 공기압을 낮거나 높게 조절할 수 있습니다.